

Instructions pour les patients



Activités pendant la période d'adaptation: Pendant cette période, éviter la pratique de sports actifs et ne pas conduire.



Usage quotidien: L'enfant doit porter ses lunettes en permanence sauf pendant le sommeil et les sports actifs.



Contrôle: L'enfant et les parents doivent vérifier l'ajustement des lunettes quotidiennement.



Visite de contrôle: Se rendre régulièrement chez son opticien pour ajuster parfaitement la monture et suivre les évolutions.



Facteurs environnementaux: Passer au moins 2h par jour en extérieur. Faire des pauses régulières lors des travaux en vision de près. Avoir une bonne qualité d'éclairage et une bonne distance de travail.



Easy Kids 2.0 VECTEUR Solution de gestion de la myopie

“ Des verres révolutionnaires pour bien gérer la myopie de vos enfants ”



Myo
Free-form



Esthétiques



Solution de gestion de la myopie

Période d'adaptation

Période d'adaptation facile, généralement **entre 1 et 3 jours**.


97% des porteurs se disent TRÈS SATISFAITS

des performances des verres en vision de loin, intermédiaire et de près.

95% des porteurs ont déclaré un EXCELLENT CONFORT

100% des porteurs ont déclaré UNE BONNE NETTÉTÉ lors du port du verre

iot
Technology

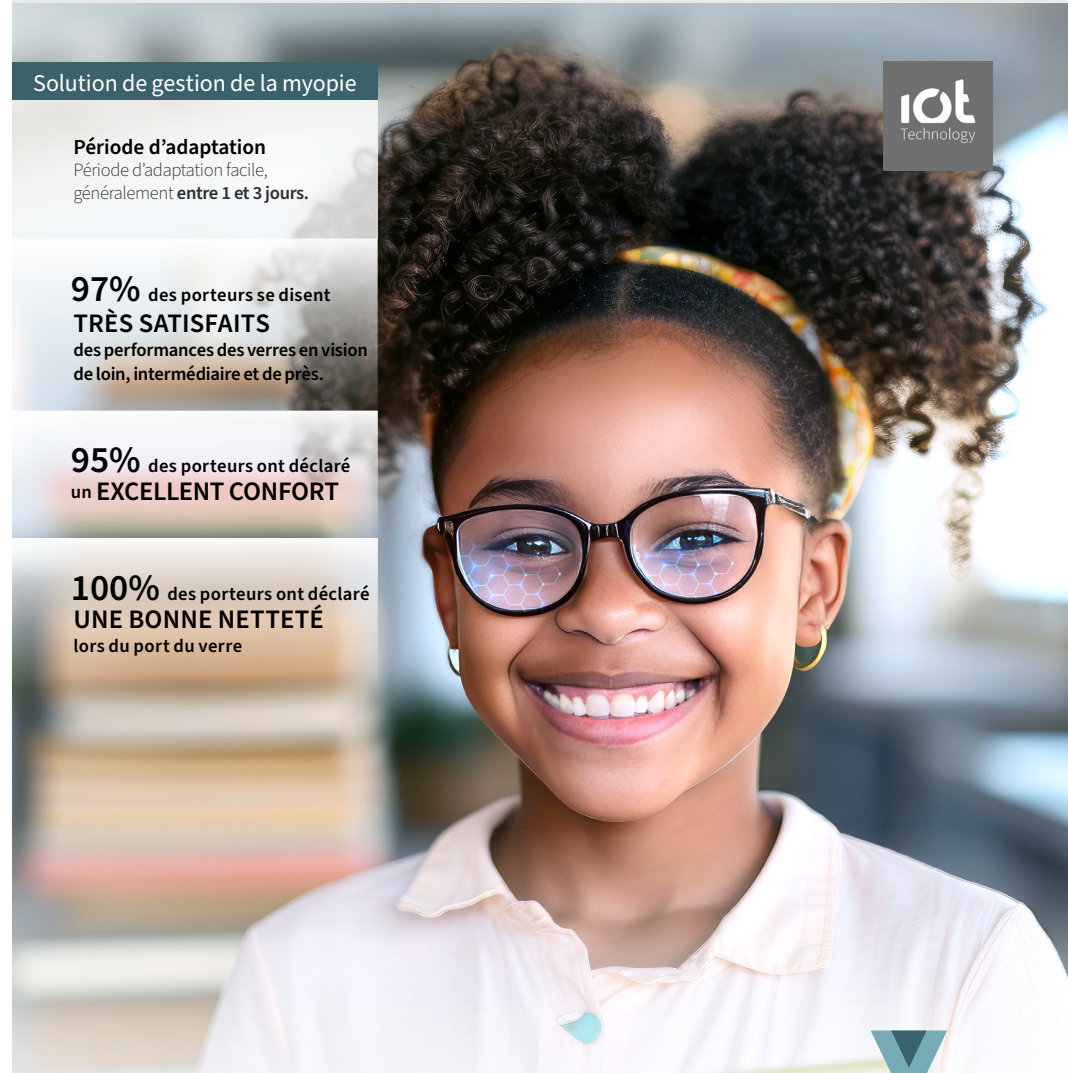

Technologie sous licence de l'Institut Brien Holden. Couvert par un ou plusieurs brevets américains 7025460, 7665842, 7997727, 8342684, 9423633 et les brevets étrangers correspondants.

Easy Kids 2.0 VECTEUR

Solution de gestion de la myopie

Les verres **Easy Kids 2.0. VECTEUR** ont été conçus pour offrir aux enfants la meilleure expérience visuelle possible tout en traitant la progression de leur myopie.

Ils sont **extrêmement efficaces pour ralentir la progression de la myopie, et combattre l'élongation oculaire** grâce à leur technologie unique Myo Free-Form qui s'adapte à l'asymétrie nasale et temporale de la rétine.

- Ralentissement de la progression de la myopie infantile en réduisant le grandissement axial de l'oeil.
- Vision parfaite dans la zone centrale.
- Confort amélioré, similaire à celui d'une lentille simple vision ordinaire.
- Les verres sont esthétiques sans courbures ni marques visibles.
- Les verres s'adaptent à tous besoins d'amincissements, en optiques et en solaires.

Une technologie d'avant-garde



Myo
Free-Form

↓ **39%**

L'allongement axiale de l'oeil est plus faible (-39% en moyenne) après 12 mois par rapport à un verre de myopie standard.

Défocalisation positive asymétrique sur la surface arrière du verre.

“Optimisez la prise en charge de la myopie de vos enfants!”

La technologie **Myo Free-Form** est basée sur la théorie de la **défocalisation hyperopique**. Les verres négatifs standard provoquent une focalisation de la lumière derrière le plan rétinien périphérique. Cela peut stimuler l'allongement de l'oeil et aggraver la myopie au fil du temps. En revanche, un verre à puissance positive en périphérie permet à la lumière de se focaliser correctement sur le plan rétinien.

Easy Kids 2.0. VECTEUR ralentit efficacement la progression de l'allongement axial de l'oeil chez les enfants. Il y parvient en incorporant une défocalisation positive asymétrique sur le verre, qui est calibrée en fonction de l'asymétrie naturelle de la rétine. Ainsi, toute la lumière est focalisée sur le plan rétinien, ce qui permet de lutter efficacement contre l'élongation oculaire et de ralentir la progression de la myopie.

Easy Kids 2.0. VECTEUR comprend deux zones. Au centre, une zone visuelle claire de 7 mm de large, de forme ovoïde, qui améliore la vision sur l'axe vertical.

Autour de cette première zone se trouve la zone de traitement de la myopie avec une défocalisation périphérique asymétrique, stratégiquement calibrée avec +1,8D et +1,5D (zones temporales et nasales) et +2,0D au bas de la lentille.



Plus
Esthétique

Alliance imbattable entre esthétique et légèreté

“Des verres sans marques visibles avec un aspect naturel!”

Optimise l'aspect esthétique du verre en utilisant les courbes de base optimales et en optimisant l'épaisseur. Notre technologie garantit un verre esthétique.

Le traitement est également indétectable sur la surface du verre, sans marques visibles.



Public cible

Dans une récente enquête mondiale, les praticiens ophtalmologistes ont déclaré que **les enfants âgés de 6 ans avec une réfraction de -0,50 à -1,00D sont des candidats parfaits** pour les verres de lunettes de gestion de la myopie.

73% des enfants portant aux verres VECTEUR Easy Kids 2.0 n'ont pas constaté d'augmentation significative de la myopie après 12 ans.

Quelques facteurs prédictifs de la myopie:

- Sédentarité avec forte demande visuelle
- Myopie chez les deux parents ou forte myopie chez l'un des parents
- Équivalent sphérique cycloplégique inférieur à +0,75D chez les enfants de moins de 6 ans
- Différence entre les réfractions temporale et nasale hors axe (20-30°) > 0,75D chez les enfants de moins de 6 ans (20-30°) > 0,5D en équivalent sphérique
- Longueur axiale supérieure à 23,5 mm avec une réfraction oculaire de + 1,00D
- Autres : Rapport Longueur Axiale / Rayon Cornéen > 3, Rapport AC/A > 4 Δ/D, Pseudomyopie ou/et Hétérophorie > 4 Δ

